

National




充電式

バブルバス

コードレス 家庭用気泡浴装置
取扱説明書

家庭用浴槽専用

品番 **BH-826**

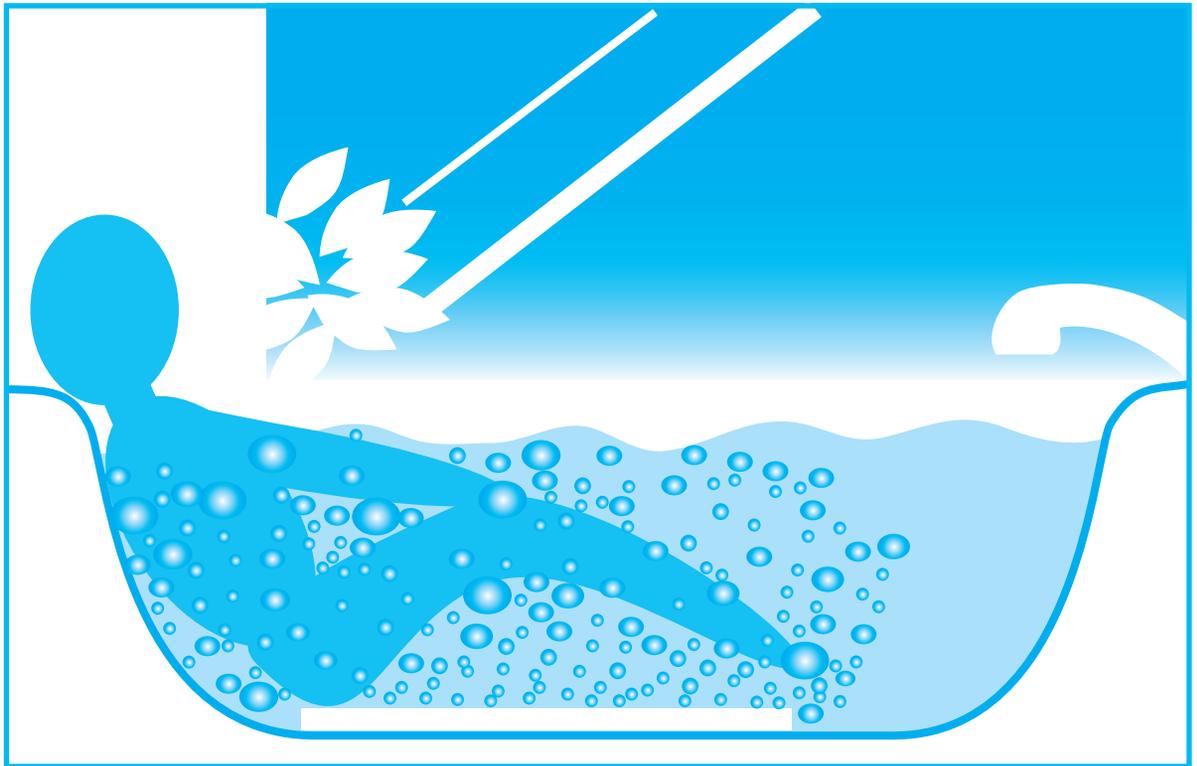

医療用具承認番号 21400BZY00345000

保証書付き

このたびは、ナショナルコードレス家庭用気泡浴装置をお買い上げいただき
まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。


保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店から
お受け取りください。

上手に使って上手に節電




Ni-MH

希少な金属を再利用し、地球環境を維持するために、不要になった電池は
廃棄せず、充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

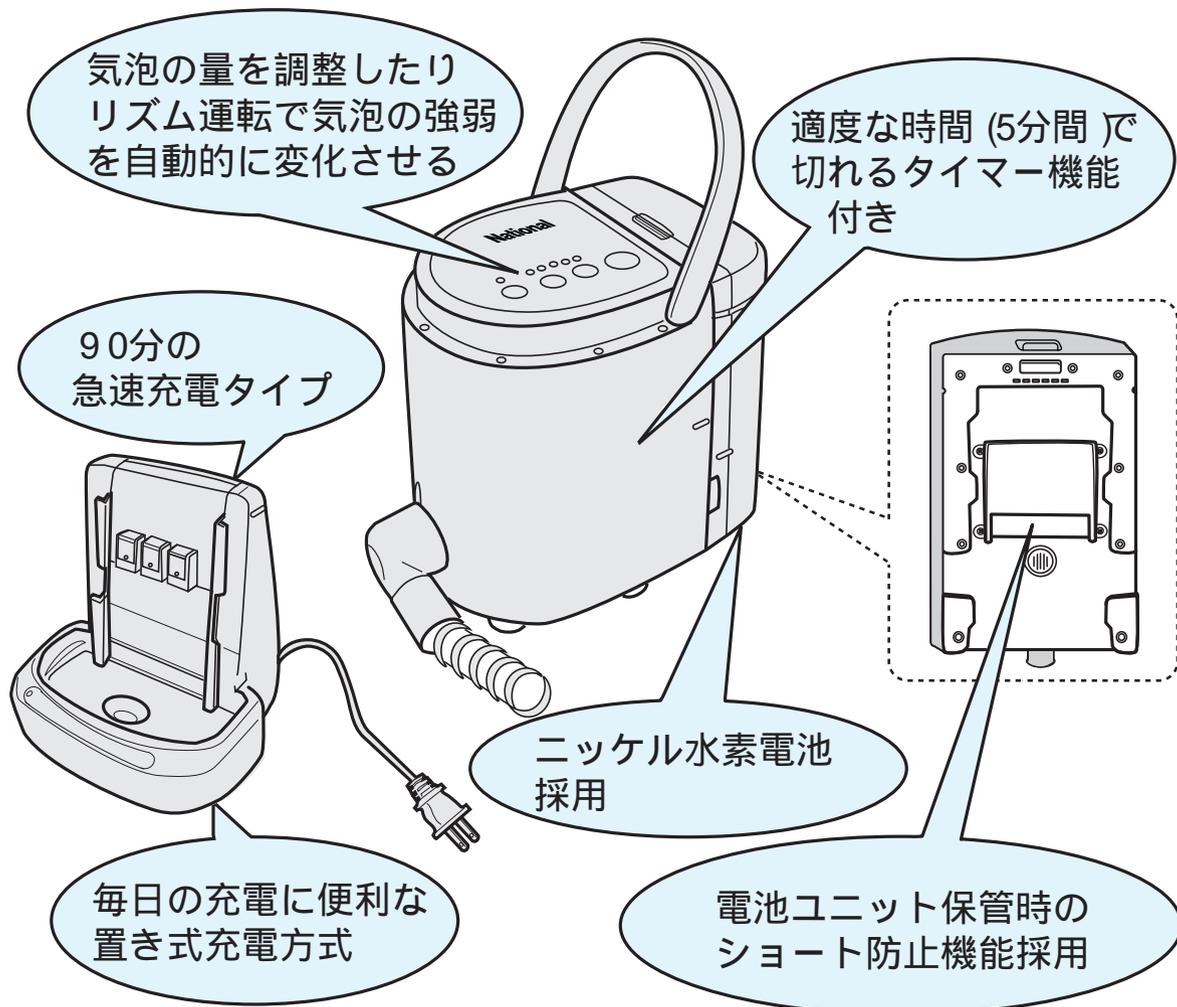

風呂設備機器使用上のお知らせ / お願い


水深 60 cm 以下で使用してください。
(深すぎると気泡が出にくくなります。)

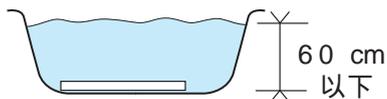


湯の花、塩分を含んだ湯には使用しないでください。



給湯機の種類によっては本機の気泡により設定水位の誤差等を生じさせる恐れがあります。

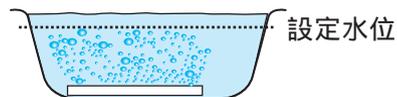

止水栓が飛び出ている浴槽は噴気盤を移動させたときに誤って止水栓を外すことがあります。

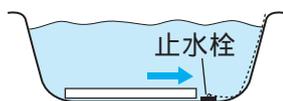

家庭用浴槽専用です。目的以外の使用はしないでください。

噴気盤やホースを入れたままで湯を沸かさないでください。

ご使用前に

安全上のご注意 (必ずお守りください)	4~7
各部のなまえ	8
付属品	8
充電のしかた	9

使いかた

接続のしかた	10
本体の使いかた	10~12
上手な使いかた	13

必要なとき

お手入れ	13
故障かな!?	14
別売品	15
消耗品	15
仕様	15
保証とアフターサービス (よくお読みください)	16~17
便利メモ	18
保証書	裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

お身体に関する内容について

警告

医師の治療を受けているときや身体に異常を感じているとき、または下記の症状のある人は必ず医師と相談する

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 心臓に障害がある人
(ペースメーカを使用している人等) | 急性(疼痛性)疾患の人
血圧に異常のある人 |
| 熱の高い人 | 生理中や妊娠している人 |
| 悪性腫瘍のある人 | 皮膚知覚障害または、皮膚に障害のある人 |
| 温浴やマッサージを禁じられている人 | 感染症疾患のある人 |
| 医師から入浴を禁じられている人 | 体調の悪い人 |



守らないと事故やトラブルの原因となります。

注意

泥酔状態では使用しない



守らないと事故やトラブルの原因となります。

使用中、気分が悪くなったり刺激が強すぎて苦痛を感じた場合は使用を中止する



守らないと事故やトラブルの恐れがあります。

ニッケル水素電池 / 電池ユニットについて

⚠ 危険

火の中に投入したり、加熱したりしない




電解液が吹き出したりして、電池を破裂させる原因となります。

専用製品以外の機器には使用しない



過電流により電池が液もれ・発熱・破裂する原因となります。

分解や改造をしない

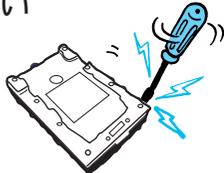

分解禁止

電池が液もれ・発熱・破裂する原因となります。

ニッケル水素電池を単独で充電しない




電池が発熱・破裂する原因となります。

金属端子間を針金などの金属で接続しない
(電池ユニット単体で保管時は金属類などと一緒に置かない)




電池がショートし、液もれ・発熱・破裂させる原因となります。

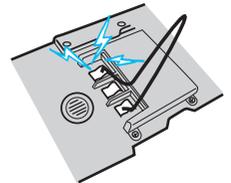


⚠ 警告

水や湯などにつけたりしない
浴室など湿気の多い
ところで保管しない

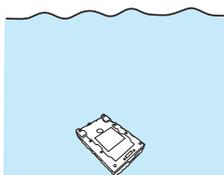

電池を発熱させる原因となります。


専用の充電台以外で充電しない

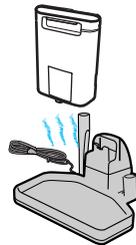

電池を液もれ・発熱・破裂させる原因となります。

⚠ 注意

強い衝撃を与えたり
投げつけない

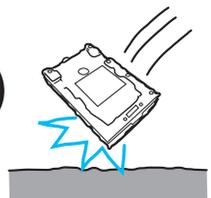

電池を液もれ・発熱させる原因となります。

充電台について

⚠ 危険

専用製品以外の電池を充電しない




電池を液もれ・発熱・破裂させる原因となります。

⚠ 警告

分解や改造をしない

 発熱や、異常動作してケガをする原因となります。
分解禁止

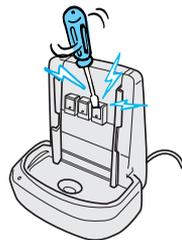

修理は販売店にご相談ください。

電源プラグを破損するようなことはしない
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたりしない)

 痛んだまま使用すると、感電・ショート火災の原因となります。

痛んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

⚠ 警告

水洗いしたり、浴室等湿気の多いところで充電しない

 感電する原因となります。

水ぬれ禁止

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

 感電する原因となります。

ぬれ手禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外での使用はしない

 タコ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因となります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる

 プラグのほこりなどがたまる
と湿気などで絶縁不良となり
火災の原因となります。

プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む


 差し込みが不完全ですと
感電や発熱による火災の
原因となります。

安全上のご注意 / 使用上のお願い

本体について


⚠ 警告

24時間風呂や交換しない湯では使用しない

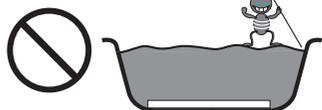

細菌による感染の原因となります。

他の治療器と併用しない

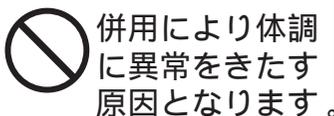


併用により体調に異常をきたす原因となります。

重量物ですので足の上に落下させない



骨折等ケガの原因となります。
落下しないところに置いてください。

お子さまだけの使用はさせない
乳幼児には使用しない

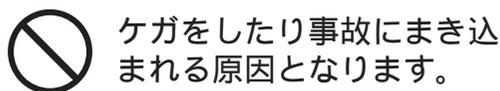

ケガをしたり事故にまき込まれる原因となります。

分解や改造をしない



分解禁止

誤動作や発熱などによりケガの原因となります。

修理は販売店にご相談ください。


⚠ 注意

気泡を目や耳に直接当てない




目や耳を痛める原因となります。

使用中は本体にタオルやビニール等をかぶせない

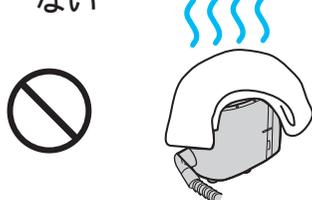

本体が発熱する原因となります。

気泡量や使用時間は体力や体質に合わせて調整する

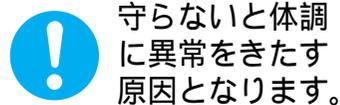

守らないと体調に異常をきたす原因となります。

使用時間は5分を目安としてください。

使用上のお願い


本体は水や湯のたまらないところに置いてご使用ください。

ホースを折り曲げたり、ねじったりしないでください。



ホースの中に水や湯をためないでください。

量によっては、気泡が出なくなります。

噴出口をふさいだり、吸入口を閉じないでください。

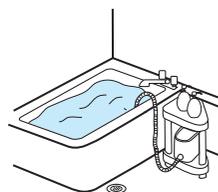

各部のなまえ

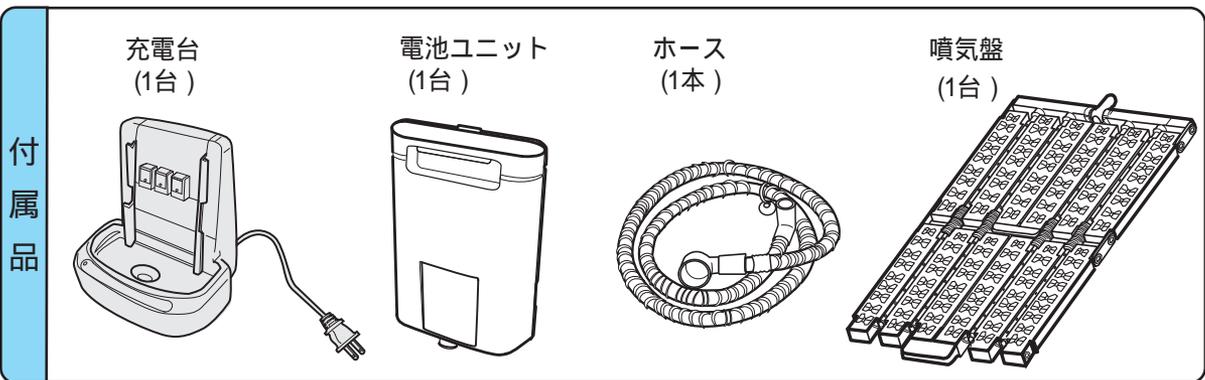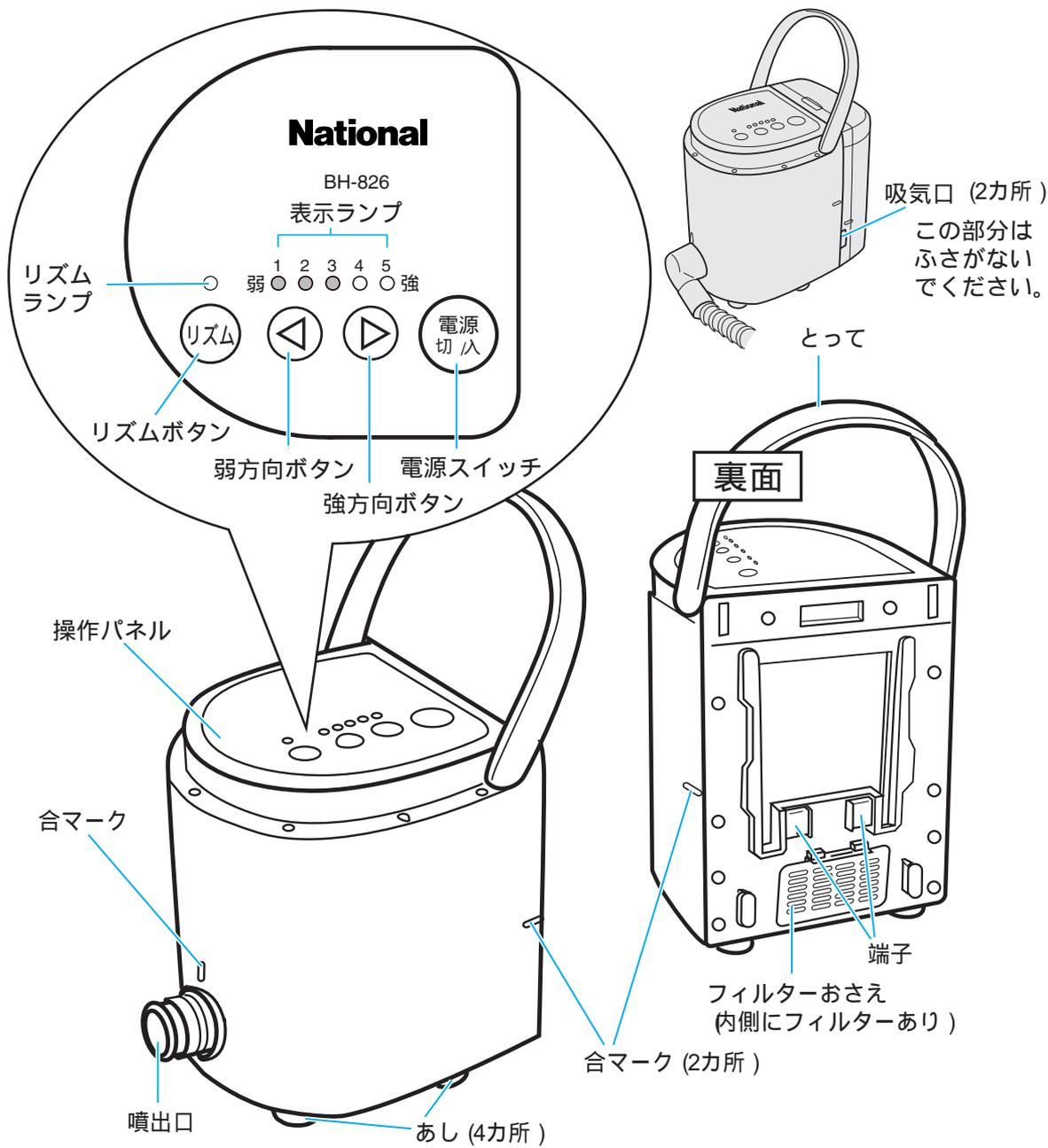

充電のしかた

各部のなまゝ充電のしかた


充電について

電池は満充電されていませんので、ご使用時には電池ユニットを充電してからご使用ください。気泡量が弱くなってきたり本体の表示ランプが点滅した場合には必ず充電してください。また長時間ご使用にならなかった場合でも1年に1回は必ず充電してください。充電中、電池ユニットや充電台が温かくなります(室温 + 15)が異常ではありません。充電時間は、周囲温度や電池ユニットの状態により多少変動します。(最大2時間)冷えた電池ユニット(約 5)以下を温かい室内で充電するときは、電池ユニットを1時間以上放置し、室温になじませてから充電してください。(満充電できない場合があります)正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、ニッケル水素電池の寿命です。新しい電池ユニットと交換してください。

電池は消耗品です

1 電源プラグをコンセントに差し込む


裏面のコード収納スペースに余分な電源コードを収納し必要長さのコードを取り出す

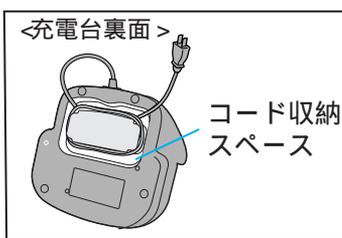

2 電池ユニットを充電台にセットして充電する

電池ユニットと充電台の合マークを合わせて矢印方向にセットする

充電時間	約90分 (電池容量なし時)
------	-------------------

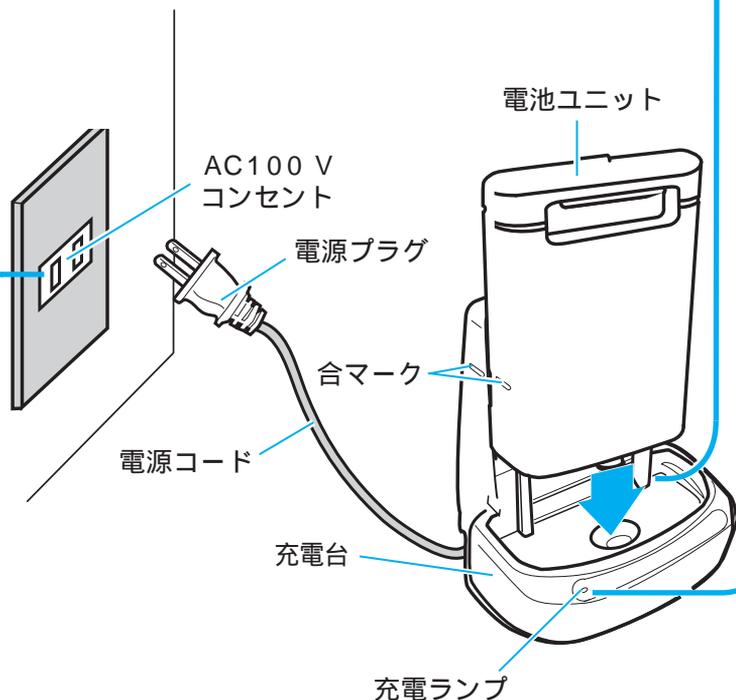

3 充電ランプ表示が緑点灯になるまで充電する

<充電ランプ表示>

赤点灯	充電中
緑点灯	充電完了
赤点滅	待機中

4 電源プラグをコンセントから抜く

抜かないと電池ユニットなしの状態でも約2.5Wの電力を消費しています。

待機中とは電池が一定温度(0~40)になるのを待っている状態で充電はしていません。


接続のしかた / 本体の使いかた

本体と付属品の接続

1 本体に充電した電池ユニットをセットする

入れかた

本体と電池ユニットの合マークを合わせ、電池ユニットが「カチッ」と音がするまで押し込む。

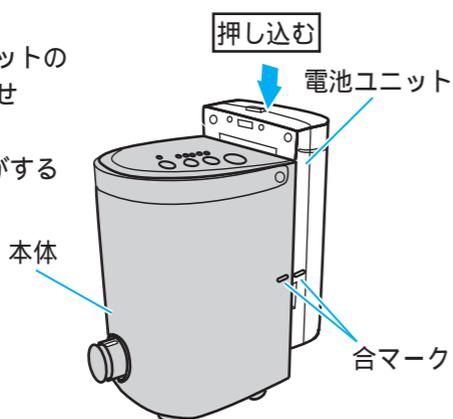

はずしかた

ロックボタンを解除させながら合マーク位置まで持ち上げ、はずす。




2 噴気盤にホースのジョイントB側を接続する



3 噴気盤を浴槽の底に沈め、上から押し吸盤で確実に固定する。水深60cm以下で使用してください。

4 本体の噴出口にホースのジョイントA側を接続する

噴出口部を上に向けて、本体とジョイントAの合マークを合わせて押し込み、ジョイントAを合マーク以外の位置で止める。

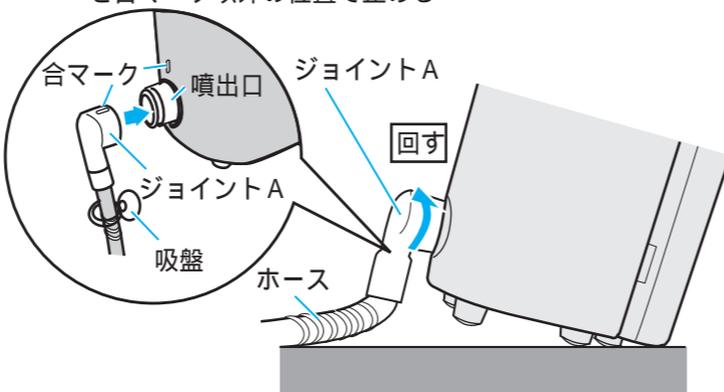


ホースのたるみが気になる場合は・・・

ジョイントA側のホースを切断して調整する


誤ってジョイントB側を切断しないでください。接続できなくなります。

- ① ジョイントAを左方向に回してはずす
- ② ホース内のスペーサ(パッキン付き)を取り出す
- ③ 必要な長さにホースを切る
- ④ スペーサ(パッキン付き)とジョイントAを元通りに取り付ける

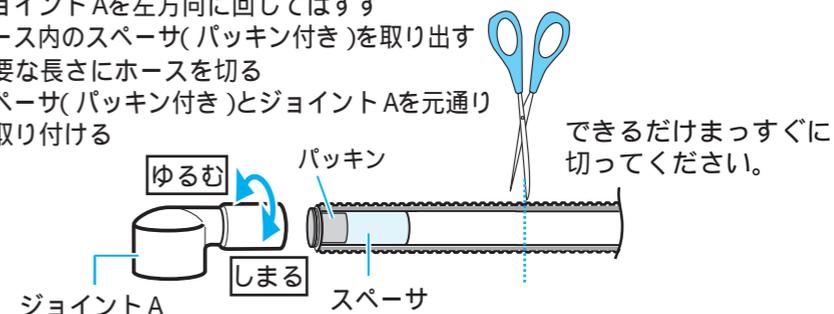

できるだけまっすぐに切ってください。

5 ホースに付いている吸盤で固定する

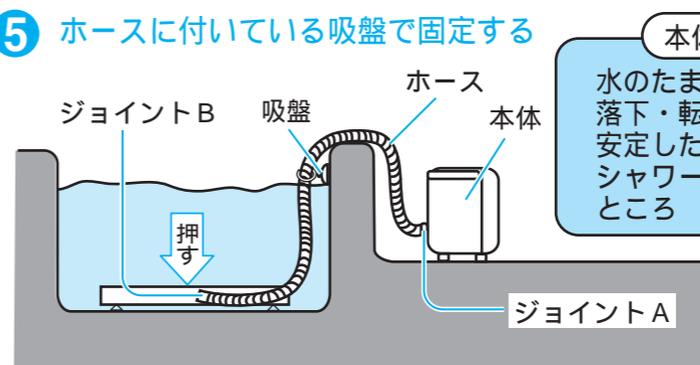

本体の設置場所

水のたまらないところ
落下・転倒の恐れのない
安定したところ
シャワー等がかかりにくいところ

本体の使いかた

通常運転

噴気レベルの調整を行ったあとは、一定量で気泡を出し電源スイッチを入れてから5分後に自動停止します。

1 電源スイッチを押す


表示ランプが『3』になり噴気盤から気泡が出る。表示ランプが点滅していたり消灯している場合は、電池ユニットを充電してください。

2 強・弱方向ボタンで噴気レベルを調整する

『1』～『5』まで5段階に調整できる

3 5分後にタイマーがはたらき停止する

タイマーがはたらく前に電源スイッチを押しても停止します。停止後、再運転時には、表示ランプの『3』から始まります。

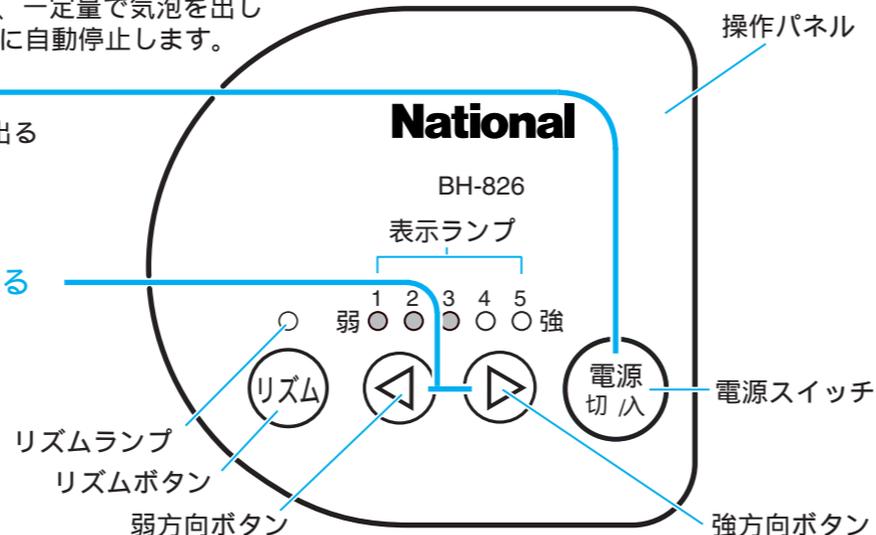


お知らせ

表示ランプが『1』でも弱方向ボタンを押すとさらに噴気レベルを弱めることができます。浴槽の水深によっては、弱めることにより気泡が出なくなることもあります。弱めた状態でリズム運転すると、通常の『1』と同じリズム運転になります。リズム運転中でも強・弱方向ボタンは使えます。

電池の使用時間および充電時期について

使用時間：約20分(90分充電、電池初期、『3』で使用時)
充電時期の目安：気泡が弱くなってきた場合
表示ランプ『1』～『5』が点滅した場合は、点滅後しばらくすると、気泡が出なくなります。早急に充電が必要です。

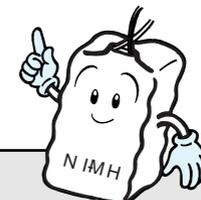

本体の使いかた

リズム運転 噴気レベルを自動的に変化させます。

1 電源スイッチを押す
表示ランプが『3』になり噴気盤から気泡が出る
表示ランプが点滅していたり消灯している場合は、電池ユニットを充電してください。

2 強・弱方向ボタンで噴気レベルを調整する
『1』～『5』まで5段階に調整できる

3 リズムボタンを押す
＜例＞ 表示ランプ『4』でリズム運転した場合



➡ 『4』を最大に噴気レベルを自動的に変化させる
再度リズムボタンを押すとリズムボタンを押す前の状態にもどる

通常運転と同様に電源スイッチを入れてから5分後に自動停止します。



使用後は・・・・・・・・・・・・・・・・

1 噴気盤および本体からホースを取りはずす

2 噴気盤を浴槽から取り出す
下図①②の順に取り出す

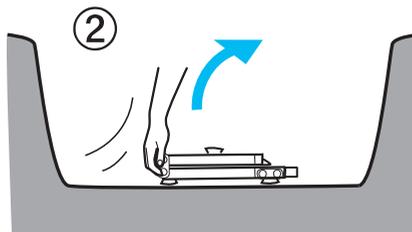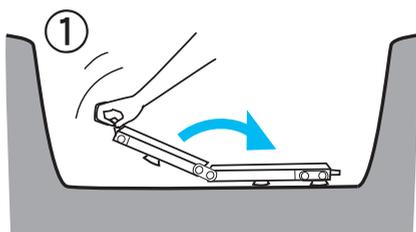

3 噴気盤およびホースの水をきって保管する
風通しのよいところに置いてください。
10日以上使用しないときは、本体と共に浴室から出してください。

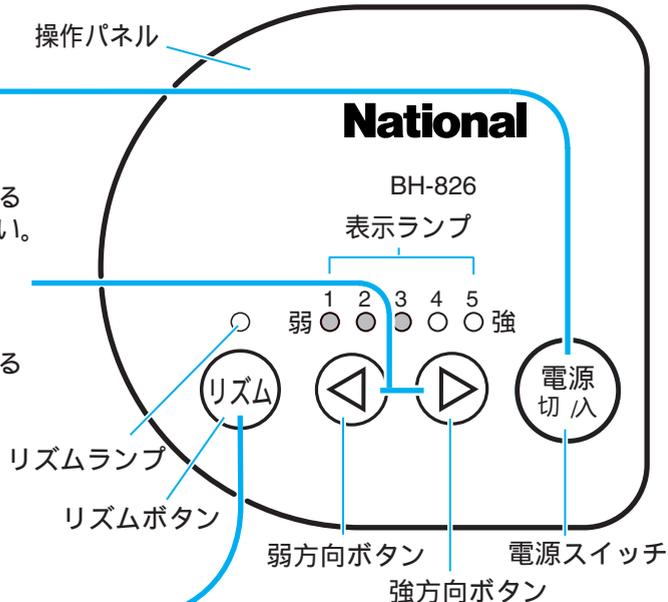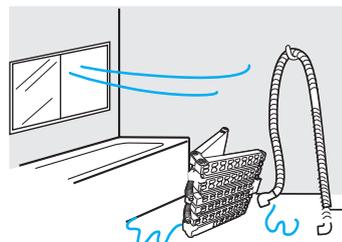

上手な使いかた お手入れ


上手な使いかた

無理のない湯温、噴気レベルや時間から始める

多少ぬるめのお湯から始める




噴気レベルは、弱めで使用時間は2～3分程度から始める

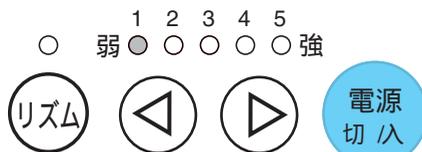

お手入れ

金属部 (電源プラグや端子等) の汚れは、ブラシまたは乾いた布でふく

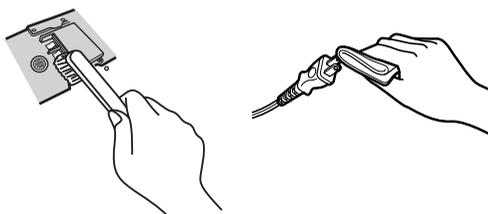


樹脂部分は、水または薄めた台所用洗剤 (中性) を含ませた布で軽くふき取る


ベンジン、アルコール、シンナー等の溶剤は使用しないでください。



パイプ部 (噴気盤、ホース) の汚れや詰まりは、市販のブラシまたは水で洗い流す

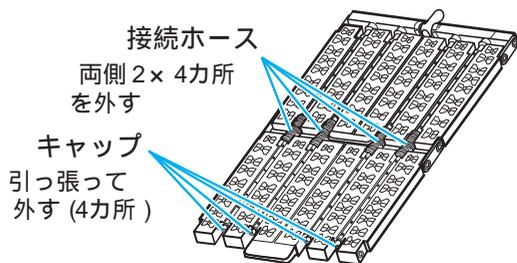

市販ブラシ

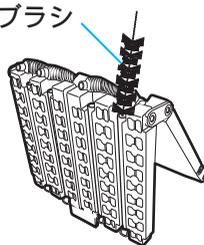



フィルターはブラシ等で汚れを取る

特に汚れが落ちにくい場合は水洗いした後、陰干しして乾燥してください。

洗濯機で洗ったり、ヘアドライヤー等で乾燥させないでください。

フィルター

取り出す

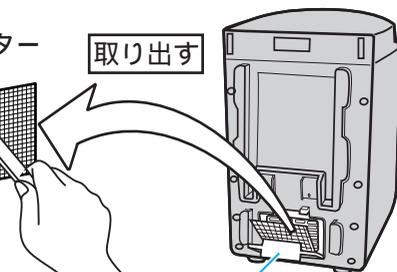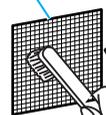

フィルターおさえ

本体の使いかた 上手な使いかた お手入れ


故障かな！？

症状	原因・調べるところ	処置	参照
充電表示ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？ 充電台に電池ユニットが正しくセットされていますか？	電源プラグをコンセントに差し込む。 電池ユニットを充電台にセットし直す。	P 9
電源スイッチを入れてもLEDが点灯しない	電池ユニットが充電されていますか？ 電池ユニットが正しくセットされていますか？	電池ユニットを充電する。 「接続のしかた」を参照しセットし直す。	P 9 P10
充電しても使用可能時間が短い	電池ユニットの充電時間が短くありませんでしたか？ 冷えた電池ユニットを室温の高いところで充電しませんでしたか？ 電池の寿命が近づいていませんか？	充電台の充電完了表示になるまで充電する。 電池ユニットを1時間以上室温になじませ充電する。 新しい電池ユニットに交換する。	P 9
電源スイッチを入れても気泡が出ない	電池容量が不足していませんか？ 本体と付属品が正しく接続されていますか？ 浴槽の湯が深くありませんか？	充電を行い、再度運転する。 「接続のしかた」を参照し接続し直す。 湯量を減らしてやり直す。	P 9 P10 P10
気泡の出かたが少ない	噴気盤やホースに湯あかがたまっていませんか？ 弱い噴気レベルで運転していませんか？ ホース内に水や湯がたまっていませんか？	噴気盤やホースの湯あかを取る。 強方向ボタンを押して噴気レベルを上げる。 ホースを接続しているジョイントの片側をはずし垂直にのばし、たまった水や湯を除去する。	P11 P10 P11
気泡が断続的に出る	ホースが折れ曲がっていたり接続が不十分ではありませんか？ 浴槽の湯が深くありませんか？ フィルターにゴミが詰まっていますか？	ホースの折れや接続部を点検し不備なところを直す。 湯量を減らしてやり直す。 フィルターを掃除する。	P 9 P 9 P11
充電部が熱い	制御回路に充電電流が流れているため室温 + 15 程度の熱は発生しますが異常ではありません。		


別売品 消耗品 仕様

お買い上げの販売店または、ナショナル商品取扱店で下記指定品番のものをお買い上げください。


電池ユニット 品番：BH-826BA

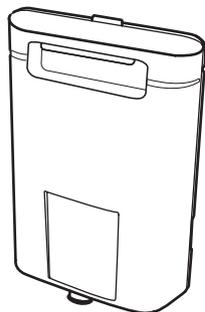

ホース 品番：BHS 1007

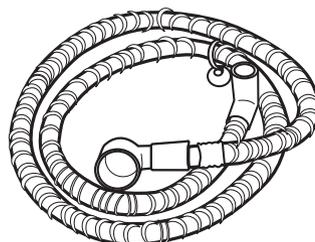

噴気盤 品番：BCS 1283

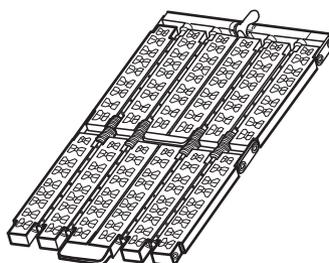

仕 様

本 体

使用電池	ニッケル水素電池 (BH-826BA)		
定格電圧	DC 21.6 V	使用温度範囲	5 ~ 40
連続使用時間	約 20 分 (90 分充電・電池初期 / 20 時)	ホース長さ	約 2 m
電池寿命	繰り返し充放電 約 500 回 (JIS C 8705 耐久特性試験による)		
外形寸法	約幅 255 × 高さ 255 × 奥行 150 (mm)	質 量	約 3.6 kg

電池寿命は周囲温度、使用時間などの使用条件により、短くなる場合があります。

充電台 (BXK 1141)

入 力	AC 100 V 105 V A 50 / 60 H 両用 (消費電力：電池ユニットを抜いたとき約 2.5 W)		
出 力	DC 23.8 V 2 A	使用温度範囲	0 ~ 40
充電時間	約 1 時間 30 分 (周囲温度 20 時)	コード長さ	約 1.5 m
外形寸法	約幅 175 × 高さ 185 × 奥行 160 (mm)	質 量	約 710 g

保証とアフターサービス よくお読みください



修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...
修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！
その他のお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取り
ください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間
(ただし電池は消耗品ですので保証期間内でも
「有料」とさせていただきます。)

修理を依頼される時

14ページの「故障かな!？」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグ
を抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入
りますが製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
当社は、このコードレス家庭用気泡発生装置の補修用性能部品を、製造打ち切り後
5年保有しております。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの
作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口
につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安
をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口
に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**
パナは 365日

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03)3256-5444 **Osaka** (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

東北地区

青森	青森市第二間屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南内65 ☎(0243)34-1301

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市本庄町大字本庄 896-2 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530		

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市長瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	---------------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0602

保証とアフターサービス
よくお読みください

愛情点検 長年ご使用のコードレス家庭用気泡浴装置の点検を！		
	こんな症状はありませんか	電源スイッチを入れても時々作動しないときがある。 充電コードを動かすと充電ランプが消えるときがある。 運転中異常な音や振動がある。
	このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検を依頼してください。	

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日	品 番	BH-826
販売店名	☎() -		
お客様 ご相談窓口	☎() -		

- メモ -

松下電器産業株式会社
松下電池工業株式会社
 〒570-8511 大阪府守口市松下町1-1

National

持込修理

ナショナル コードレス 家庭用気泡浴装置保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	BH-826
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間 <small>(ただし、電池は除く)</small>
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____ 様
	電話 () -
販売店	住所・氏名 _____
	電話 () -

松下電器産業株式会社

松下電池工業株式会社

〒570-8511 大阪府守口市松下町 番 号 電話(06)6991-1141

ご購入店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しくたさい

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ)車輛、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご添付がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
- 電池は消耗品ですので、保証適用外です。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」(16ページ)をご覧ください。

※ **This warranty is valid only in japan.**