


## ドルツ・音波振動 ハブラシ

EW1023

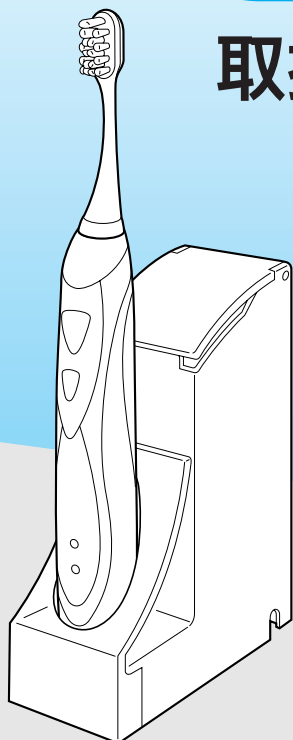

# 取扱説明書

### もくじ

|                     |    |
|---------------------|----|
| 安全上のご注意 .....       | 2  |
| 各部のなまえ .....        | 4  |
| お使いになる前に .....      | 5  |
| 充電器の設置 .....        | 6  |
| 充電のしかた .....        | 7  |
| 使いかた .....          | 8  |
| 上手なみがきかた .....      | 10 |
| 使い終わったら .....       | 12 |
| お手入れのしかた .....      | 13 |
| 故障かな?と思ったとき .....   | 14 |
| 定格・仕様 .....         | 16 |
| 別売品 .....           | 16 |
| 製品を廃棄するときのお願い... .. | 17 |
| 保証とアフターサービス .....   | 18 |

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

# 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ 注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。

## 絵表示の例



⊘記号は、禁止の行為を示しています。  
(左図の場合は分解禁止)



●記号は、行為を強制したり指示したりするものです。  
(左図の場合は電源プラグを抜く)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## ⚠ 警告



水場使用禁止

● 充電器を風呂場で使用しない。  
感電のおそれがあります。



禁止

● 充電器の水洗いはしない。  
感電のおそれがあります。

## ⚠ 警告



禁止

● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。  
感電・ショート・発火の原因になります。

● 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。  
電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。



ぬれ手禁止

● ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。  
感電のおそれがあります。



電源プラグを抜く

● お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
抜かないと感電やけがをするおそれがあります。



必ず守る

● 電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除をする。  
付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。

● 必ず交流100-120Vで使用する。  
守らないと火災・感電の原因になります。



分解禁止

● 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。  
火災・感電・けがの原因になります。  
修理（電池交換など）はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

## ⚠ 注意



必ず守る

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。

守らないと感電・ショートして発火することがあります。




電源プラグを抜く

- 1週間以上使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。

抜かないと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。


## 各部のなまえ

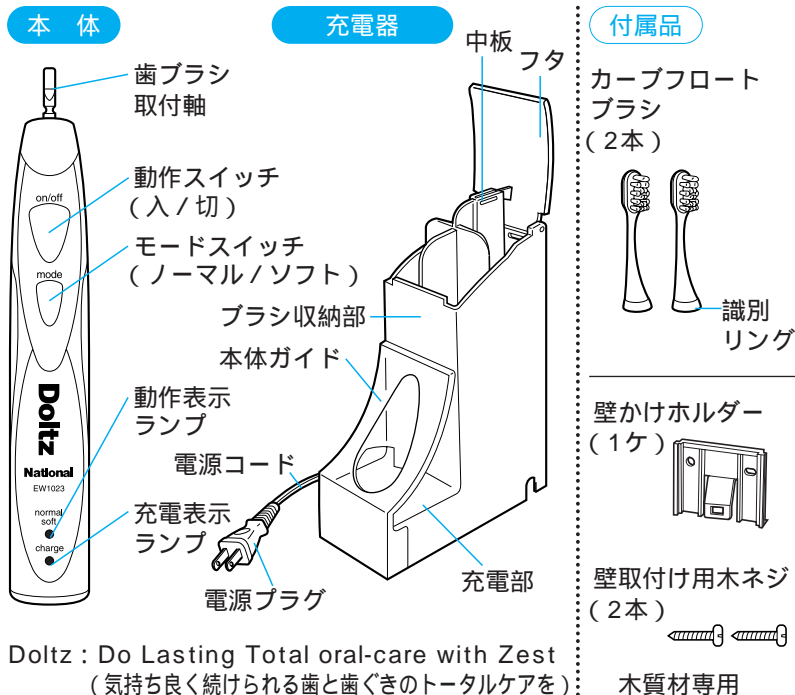

## お使いになる前に

はじめてお使いになる場合はこのページを必ずお読みください

### 従来の電動歯ブラシと異なる音波振動 方式だから...

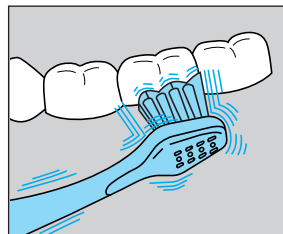


- ブラシの毛先を軽く歯に当てるだけでみがけます。
- 個人差はありますが、使いはじめは音波振動によるくすぐったさなど違和感を感じる場合があります。数回使用していただくと慣れてきます。

音波領域内での振動

使いはじめや違和感を感じる場合は、無理をせず、ゆっくりと試しながらご使用ください。  
(ソフトモードの使用をおすすめします。)

## ⚠ 注意

- 乳幼児や自分で操作ができない方、口内の感覚が弱い方などは使用しない。
- 治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内に気になる症状がある場合は、その部位での使用はしない。けがの原因になります。
- ヤニ取り用・美白用などの研磨剤が多く含まれている歯みがき剤を使用しない。歯や歯ぐきを傷める原因になります。
- ヤニ取り用などの歯みがき剤は歯を研磨する作用が大きく、本体やブラシの破損の原因にもなるため、使用しないでください。一般的な歯みがき剤であればご使用いただけます。その場合は少量をつけてお使いください。

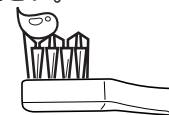


安全上の注意 / 各部のなまえ / お使いになる前に

# 充電器の設置


## コードのセット方法

置く場所に合わせてコードは左右どちらかのコードガイドに押し込みます

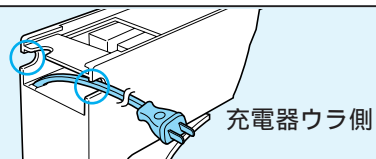



## 洗面台や棚などに置くときは

- 1 水平で安定したところに充電器を置く
- 2 電源プラグをコンセントに差し込む

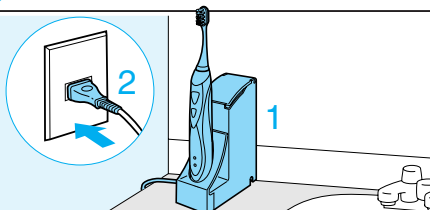

## 壁に固定するときは

- 1 取付けの位置を決めて壁かけホルダーを木ネジで壁に取付ける
- 2 充電器を上から壁かけホルダーに取付ける
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む

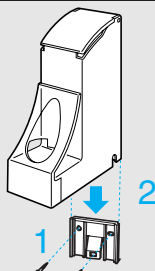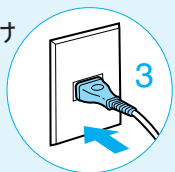

## 警告

- 充電器を風呂場で使用しない。
- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。
- 必ず交流100-120Vで使用する。  
上記のことを守らないと感電・ショート・発火・火災の原因になります。


- 本体と充電器は、乳幼児の手の届かない所に設置してください。

# 充電のしかた

使いはじめ(購入直後や3ヵ月以上放置したとき)や使用中に動作が停止したときには必ず15時間以上充電してください

充電器に本体を  
**立てる**

- 急速充電式ではありません
- 表示ランプを正面にして本体をまっすぐ立ててください  
かたむいていると充電できません

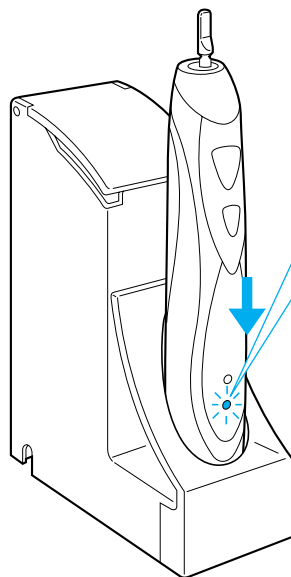

充電表示ランプ(赤)が点灯

- 常時充電式です
- 充電が完了してもランプは消えません
- 通常の充電状態で使用可能時間の目安は約45分です  
(電池の劣化により減少します)

コンセントにつないだ充電器に本体を常に置いていても性能に問題はありません。  
(充電電流をコントロールしておりますので電池の寿命を低下させることはありません。一般的に電池容量を使いきらずに充放電を繰り返すと放電するときの電圧が低下し、使用回数が減少するメモリー効果が発生しますが、本ハブラシは性能、使用回数に影響を及ぼさない工夫をしております。)

## 注意


- 充電器の上にコインやクリップを置かない。  
熱くなり、やけどの原因になります。

- 充電中、本体が多少あたたかくなりますが異常ではありません。
- 充電は、専用の充電器を使用してください。
- 正常な充電をしても使用できる時間が短くなったときは蓄電池の寿命です。(目安は約3年ですが使用・保管などの状態により大きく変化します。)販売店に電池の交換を依頼してください。

# 使いかた

## 1 カーブフロートブラシを 確実に取りつける

- カーブフロートブラシ...歯垢除去(歯みがき)にご使用ください
- 本体とのスキマは、動作に必要なものです異常ではありません

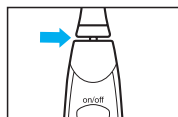


## 2 口の中に 歯ブラシを入れる

- 特に歯みがき剤をご使用の場合は、とびちりを防ぐためにも、必ず動作させる前に歯ブラシを口の中に入れてください

## 3 動作スイッチを押して 動作させる

- 動作開始後、ソフトスタート機能により約2秒で徐々に所定の速度(ノーマル)になります
- 「上手なみがきかた」は、P10~11を参照してください

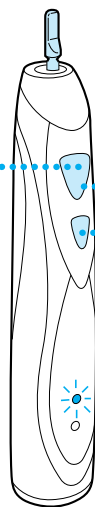

## 4 「ソフト」モードで使うときはモードスイッチを 押す

- スイッチを押すたびに、「ソフト」「ノーマル」と動作が切りかわります

| モード  | 使いかた  | 動作表示ランプ |
|------|---|---------|
| ノーマル | ● 通常の歯みがき   | グリーン    |
| ソフト  | ● 歯ぐきの状態が気になるときの歯みがき<br>● 「ノーマル」では、みがき感が強く感じられるときの歯みがき<br>● 使いはじめ | オレンジ    |

別売のシリコンブラシは「ノーマル」「ソフト」モードでも問題なくご使用いただけます

## 5 みがけたら動作スイッチを押して 動作を止める

- だ液などのとびちりを防ぐために、口の中で動作を止めてください

### みがき時間お知らせタイマー

スイッチを入れてから約2分ごとに動作が一時的に停止(2回)して再び動き出します  
みがき時間の目安にお使いください

モードスイッチを押した場合、押したときから2分ごとに動作します

### 押し当てすぎ防止機能

ブラシを押しつける力が強いと、ブラシの振幅が小さくなります

## 歯ブラシの交換について


- 歯ブラシは3ヵ月を目安に新しいものとお取り替えください  
(毛先が広がった歯ブラシでは効果的なブラッシングができません)

- 使いはじめてから2~3日の間、歯ぐきから出血することがありますが、通常2~3日で出血は止まります。もし、1週間以上出血が続くような場合は使用を中止し、歯科医にご相談ください。
- 歯みがき・歯ぐきマッサージ以外の目的に使用しないでください。
- 落としたり乱暴に扱ったりしないでください。

# 上手なみがきかた

## カーブフロートブラシ


- 歯みがきにご使用ください

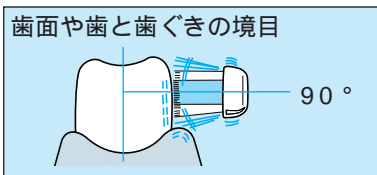


- 90°に当てる



- タテに当てる
- 角度に沿って当てる

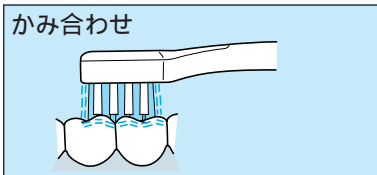


- 上から90°に当てる

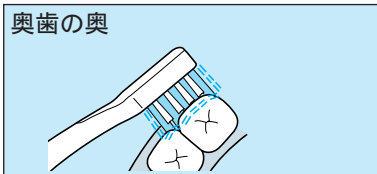

- 先端の毛を使う

### ⚠ 注意


- 歯や歯ぐきに歯ブラシを強く当てたり、1カ所に長く当てたりしない。  
歯や歯ぐきを傷める原因になります。歯周病がひどい人などは歯科医にご相談の上、ご使用ください。
- 歯ブラシのプラスチック部分を歯に当てない。  
歯や歯ぐきを傷める原因になります。

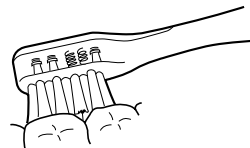

### あてる強さ

- ブラシの毛先が歯に軽く触れる程度にあててください

### 動かし方

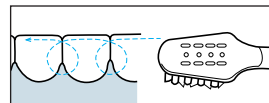

- 弧を描くようにゆっくりと動かしてください。



# 使い終わったら

## 歯ブラシと本体の洗いかた


### 歯ブラシ



フロート部(紫色の毛)を動かしながら  
**水洗いする**

- 水洗い後は、よく振って水気を切ってください
- カーブフロートブラシは毛を強くひっぱらないでください。(毛が抜ける原因になります)
- 80℃以上のお湯では洗わないでください


### 本体

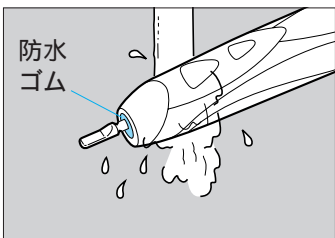

本体を  
**水洗いする**


- 本体を水の中に放置しないでください
- 水洗い後は、タオルなどで水分をふきとってください
- 防水ゴムは、傷つけたり、固いものでこすったりしないでください(内部に水が入る原因になります)
- 40℃以上のお湯では洗わないでください

## 洗い終わったら

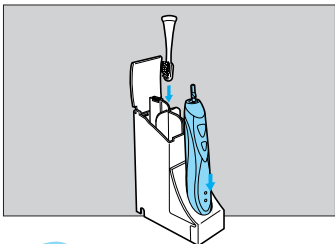

本体を  
**充電器に立てる**  
歯ブラシを  
**ブラシ収納ケースに  
収納する**

## 識別リングが外れたら

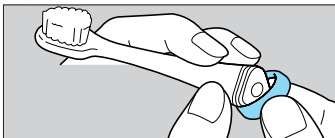

左図のように取り付けてください

- 切れやすいので強く引っ張らないでください
- 識別リングがない状態で使っても性能に影響はありません

# お手入れのしかた

## ブラシ収納部のお手入れ

|                             |  |                         |
|-----------------------------|--|-------------------------|
| <p>① 中板をはずす</p>             | <p>② 中板を水洗いする</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 水洗い後は水分をふきとる</li></ul>               | <p>③ 充電器の中を裏側から布でふく</p> |
| <p>④ 中板のフックをフタの裏側に取り付ける</p> | <p>フタがはずれたときは</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 片側①を差し込み、片側②を後方より押し込んでください</li></ul> |                         |

## 充電部のお手入れ

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>汚れを布で<br/><b>ふきとる</b></p>                       | <p>本体ガイドがはずれたときは</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 正面から差し込む</li></ul> |
|  | <p>6ヵ月に一度は、<br/>電源プラグの金属部の間を<br/><b>からぶきする</b></p> |   |


## ⚠ 警告

- 充電器の水洗いはしない。
- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いておく(ぬれた手で抜き差ししない)。
- 電源プラグは定期的に掃除をする。感電やけが、絶縁不良による火災の原因になります。


- 洗剤を使用する場合は中性洗剤をご使用ください
- シンナーやベンジン、アルコールは変色の原因になりますので絶対に使用しないでください

# 故障かな？と思ったとき

下記の点検をお願いします

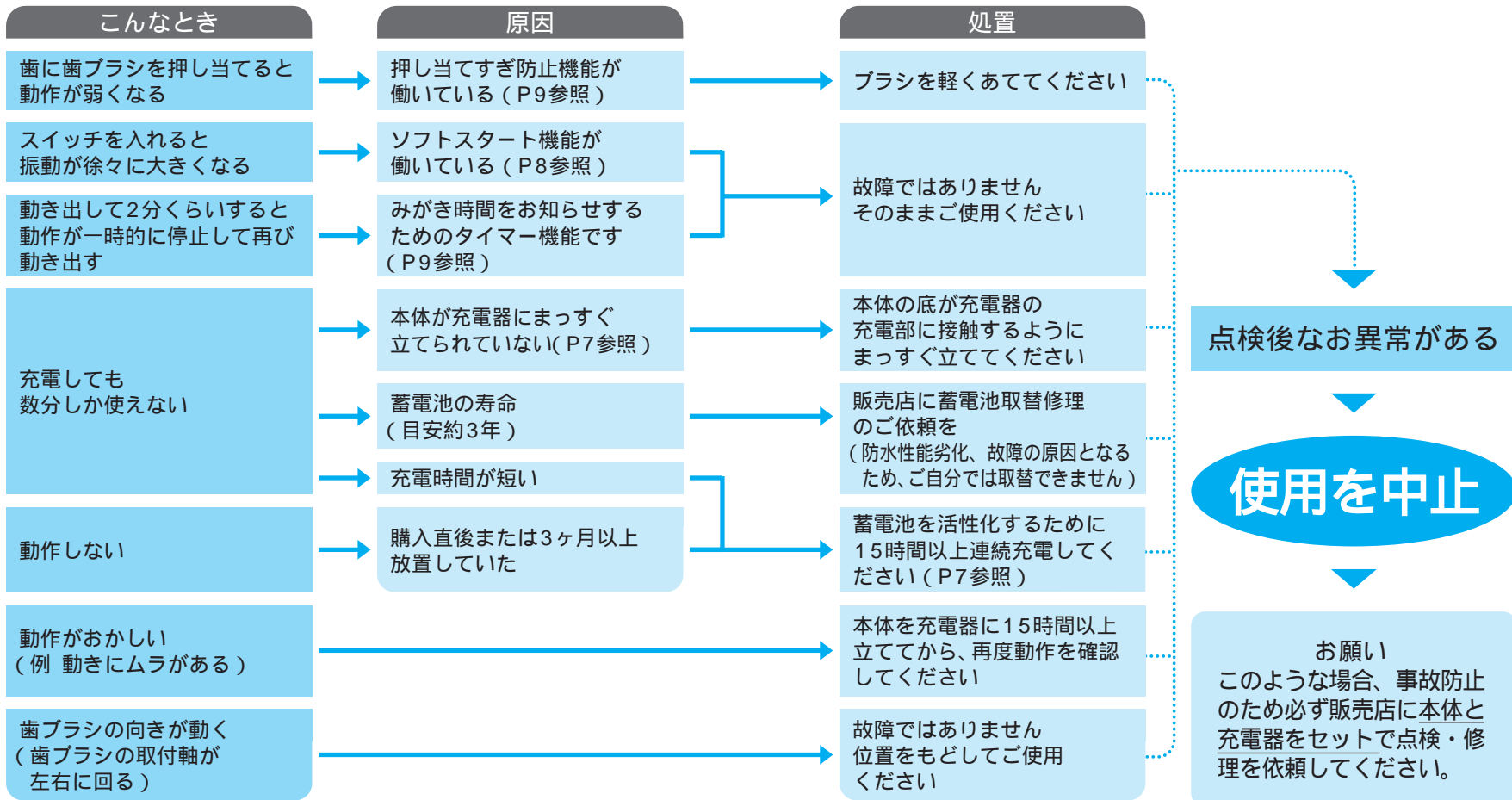

故障かな？と思ったとき

| 愛情点検  | 長年ご使用の電動歯ブラシの点検をぜひ！   |   |
|---|---|---|
|  | このようなことはありませんか？   | お願い   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>コードや電源プラグが異常に熱い。</li> <li>動作中に異常な音、振動がする。</li> <li>本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。</li> </ul> | 故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。 |

**警告**

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。火災・感電・けがの原因になります。修理（電池交換など）はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。



# 定格・仕様

|                   |  |      |                              |
|-------------------|--|------|------------------------------|
| 電源方式              | 充電式  | 使用時間 | 連続使用時間                       |
| 充電時間              | 15時間   |      | 電池の劣化により減少します                |
| 定格電圧              | AC 100-120V<br>50/60Hz                       | 大きさ  | 約45分<br>(室温20℃にて満充電後300g負荷時) |
| 使用電池              | ニッケル水素電池(Ni-MH)<br>電池1個 (DC 1.2V<br>1100mAh) |      | 本体<br>充電器                    |
| 消費電力              | 2W (充電時)                                     | 質量   | 本体<br>充電器                    |
| ブラストローク数<br>(振動数) | ヨコ 約31,000ブラストローク/分<br>タテ 約40,000ブラストローク/分   |      | 160g<br>215g                 |
| ブラシ動作<br>(無負荷時)   | ノーマル   | 質    | 充電器                          |
|                   | ソフト  |      |                              |

## 別売品

最寄りの販売店へご用命ください

別売替ブラシ (音波振動ハブラシ専用)

|                     | 品番               | 本製品でのブラシの動き                        |
|---------------------|------------------|------------------------------------|
| カーブフロート<br>ブラシ      | EW0922<br>(2本入)  | ヨコ・タテ・ナメ<br>の複合的な動き                |
| 3アングルブラシ            | EW0900<br>(2本入)  |                                    |
| 山切りブラシ<br>(Vヘッド)    | EW0910<br>(2本入)  | ヨコ方向のみに近い動き<br>タテ・ナメの動きが<br>弱くなります |
|                     | EW09104<br>(4本入) |                                    |
| フロートブラシ             | EW0920<br>(2本入)  |                                    |
|                     | EW09204<br>(4本入) |                                    |
| シリコンブラシ<br>(歯ぐきケア用) | EW0930<br>(1本入)  |                                    |

カーブフロートブラシ以外の音波振動ハブラシ用の替ブラシは商品の特性上、タテ・ナメの動きが弱くなります。  
音波振動ハブラシ用以外の別売替ブラシやフロス、回転ブラシ、スイングブラシはご利用できません。

## 製品を廃棄するときのお願い

(ニッケル水素電池リサイクルにご協力を)


### 警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。火災・感電・けがの原因になります。修理(電池交換など)はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

### 製品を廃棄するときの蓄電池の取り出しかた

- 分解前に完全に放電させてください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。
- 歯ブラシ取付軸(P4参照)を押しながら、①②③④の手順で分解してください。
- 取り出した電池は⊕⊖端子をショートさせないように注意してください。

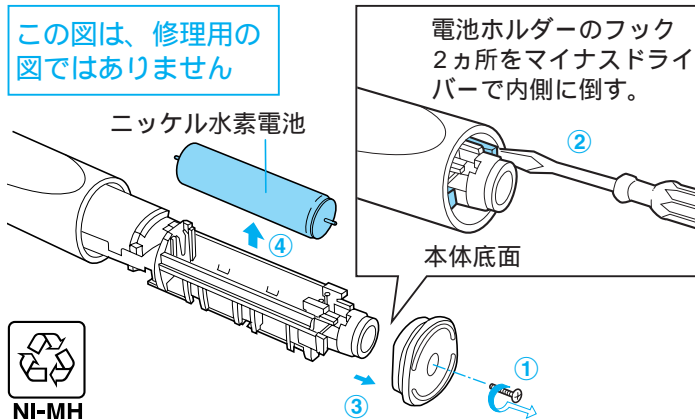

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

## 保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

当社はこのドルツ・音波振動ハブラシの補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しております。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼される時

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書の14～15頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからご購入上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間中は  
お買い上げの販売店まで保証書をそえて製品をご持参ください。  
保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

## 松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

### 修理・部品などのご相談は 「修理ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-081-365**  
【受付時間: 月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

札幌 ☎011-261-6401 大阪 ☎072-878-8999

東京 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531

名古屋 ☎052-551-7900

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

### 商品・お取扱いなどのご相談は 「お客様ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-081-713**  
【受付時間: 月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

松下電工お客様ご相談センター

☎ 06-6904-4382

FAX 06-6904-4471

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

0305

## 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。なお、持込修理の対象商品を直接松下電工お客様ご相談窓口へ送付した場合は送料等はお客様負担となります。また、出張修理を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店または松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 松下電工お客様ご相談窓口は取扱説明書の「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧ください。

## 修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または松下電工お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

松下電工株式会社 ビューティ・パーソナルライフ事業部

〔〒522-8520〕滋賀県彦根市岡町33番地

持込

## ドルツ・音波振動ハブラシ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

|        |                          |                 |     |
|--------|--------------------------|-----------------|-----|
| 品番     | EW1023                   |                 |     |
| 保証期間   | 本体・充電器<br>(ただし、ブラシは除きます) | お買い上げ日より<br>1年間 |     |
| お買い上げ日 | 平成                       | 年               | 月 日 |
| お客様様   | ご住所 _____                |                 |     |
|        | お名前 _____                |                 | 様   |
|        | 電話 ( )                   |                 |     |
| 販売店    | 住所・店名                    |                 |     |
|        | 電話 ( )                   |                 |     |

松下電工株式会社 ビューティ・パーソナルライフ事業部  
〒522 - 8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749)26 - 7890

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。